

كيفية إجراء اختبار كوفيد-19


باستخدام QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test

نبذة

هذا دليل مبسط لمجموعة QuickVue At-Home OTC COVID-19 Test للحصول على المعلومات الكاملة، يرجى الرجوع إلى ورقة التعليمات وصحيفة وقائع المريض في المجموعة. يتمتع هذا المنتج بتصريح الاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء (FDA).



للحصول على مقطع فيديو حول كيفية إجراء الاختبار، انتقل إلى quickvueathome.com/#video_testkit-2

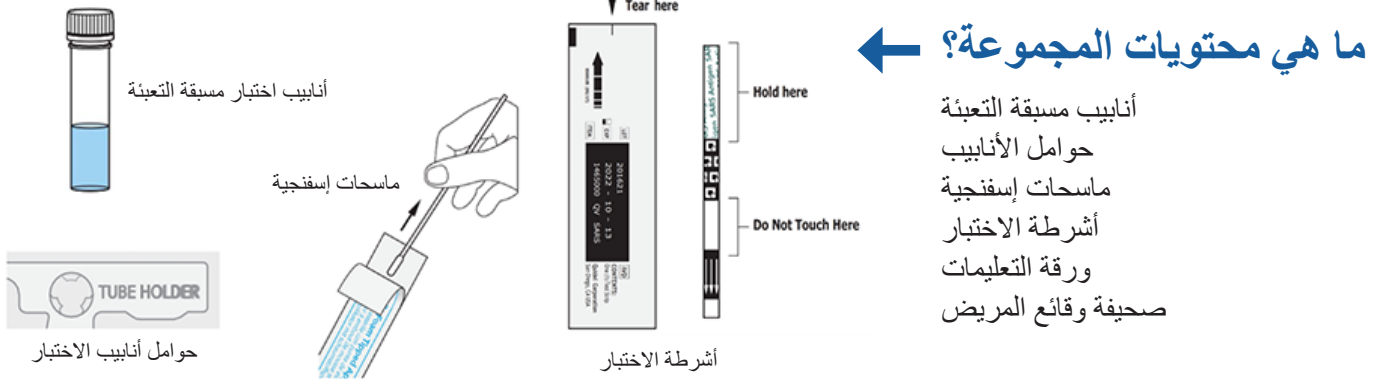

ما الذي تحتاج إليه أيضاً؟ →

ساعة أو مؤقت (غير مرفقين)
من المهم جداً مراعاة الدقة في الوقت لهذا الاختبار!




لبدء الاختبار

اغسل يديك وضع المجموعة على سطح مستوي ونظيف. تأكد من وجود إضاءة كافية في الغرفة. إذا كنت تجري الاختبار على شخص آخر، فاستخدم قناع وجه. افتح المجموعة وتأكد من وجود جميع العناصر المدرجة أعلاه. أحضر المؤقت أو الساعة واتبع التعليمات المفصلة الموجودة على الجانب الآخر.



إجراء الاختبار

١ انزع الغطاء من أحد الأنابيب وضعه في حامل الأنبوب.

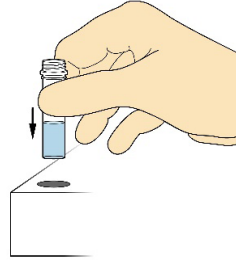


٢ لا تلمس رأس المسحة.




انزع الغلاف عن المسحة. لا تلمس رأس المسحة.


٣ أدخل المسحة من 1/2 إلى 3/4 بوصة تقريباً في فتحة أنف واحدة وافركها حول الجدران الداخلية ٤ مرات على الأقل. باستخدام المسحة نفسها، كرر الخطوة في فتحة الأنف الأخرى. سيستغرق ذلك ١٥ ثانية تقريباً.

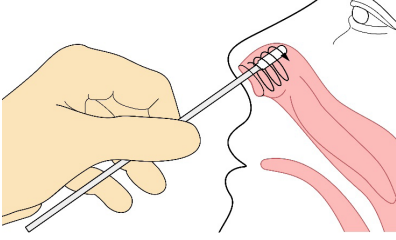

٤ ضع المسحة في الأنبوب المفتوح بمجرد الحصول على العينة من الأنف. تأكد من أن المسحة تتلامس مع الجزء السفلي من الأنبوب. حرّك المسحة ٣ أو ٤ مرات.

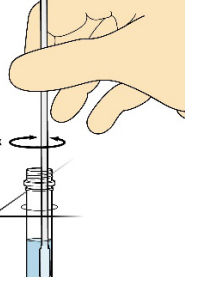


٥ اترك المسحة في الأنبوب لمدة دقيقة واحدة على الأقل. (استخدم مؤقت أو ساعة!) قد تحصل على نتائج خطأ إذا تركت المسحة لمدة أقصر أو أطول من المطلوب.

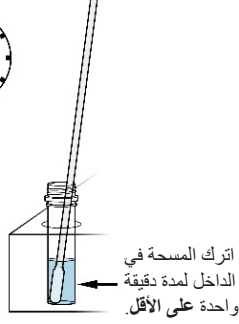

اترك المسحة في الداخل لمدة دقيقة واحدة على الأقل.

٦ بعد دقيقة واحدة، أخرج المسحة من الأنبوب، مع فرك رأس المسحة على جدار الأنبوب لإخراج أكبر قدر ممكن من السائل. تخلص من المسحة.

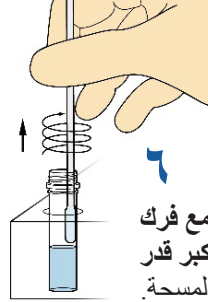

٧ افتح كيس شريط الاختبار بحذر وضع شريط الاختبار في الأنبوب المفتوح مع توجيه الأسهم لأسفل. اترك الشريط في الأنبوب لمدة ١٠ دقائق. (استخدم مؤقت أو ساعة!)




اترك الشريط في الداخل لمدة ١٠ دقائق على الأقل.



توجيه الأسهم لأسفل

٨ بعد ١٠ دقائق، أخرج شريط الاختبار من الأنبوب وضعه على سطح مستو مع إضاءة جيدة. اقرأ شريط الاختبار في الحال! إذا انتظرت لأكثر من ٥ دقائق للقراءة، فقد تحصل على نتائج خطأ أو غير صالحة.

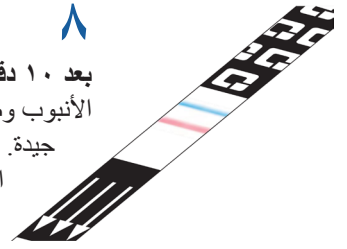

قراءة نتائج الاختبار

يوجد ٣ أنواع من نتائج الاختبار ممكنة: إيجابي أو سلبي أو غير صالح، وهو اختبار لا يمكن استخدامه.

نتيجة إيجابية =

خط واحد باللون **الزهري** + خط واحد باللون **الأزرق**
من المحتمل أن تكون مصاباً بكوفيد-١٩. يجب أن تعزل نفسك. وإذا كانت لديك أعراض تزعجك أو تقلقك، فتواصل مع مقدم الرعاية الصحية.



نتيجة سلبية =

خط واحد باللون **الأزرق**
من غير المحتمل أن تكون مصاباً بكوفيد-١٩. ولكن وإذا كانت لديك أعراض تزعجك أو تقلقك، فتواصل مع مقدم الرعاية الصحية.



نتيجة غير صالحة =

خط واحد باللون **الزهري** أو عدم ظهور خطوط يتعين عليك إجراء اختبار جديد. ابدأ من جديد من أول خطوة باستخدام أنبوب ومسحة وشريط اختبار جديد. عند الحصول على نتيجتين غير صالحتين، اتصل على 1-833-784-2588.

